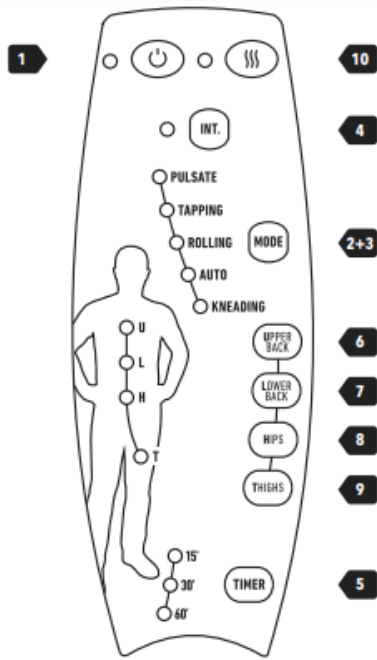




Massagesædet med vibration og varme er udstyret med fem motorer. Disse skaber vibrationer, som hjælper med at reducere spændinger og muskelsmerter samt lindre trætte muskler. Komfortabel og nem at bruge, tilbyder Rygmassageren en meget behagelig vibrerende massage. Denne enhed er udstyret med en funktion, der giver dig mulighed for at målrette massageområdet, og den har også en automatisk funktion, der giver dig en harmonisk sekvens af forskellige massageindstillinger. Derudover betjenes den med en brugervenlig fjernbetjening, der passer komfortabelt i din håndflade. Rygmassageren kan bruges på kontoret, derhjemme osv.

Læs venligst alle instruktioner grundigt, inden du bruger din Rygmassager, især disse få grundlæggende sikkerhedsinstruktioner:

- Brug kun dette apparat til de formål, der er beskrevet i denne manual.
- Husk at fjerne silica-posen, der bruges til at bekæmpe luftfugtighed, inden du bruger apparatet.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået vejledning eller instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Hvis strømforsynings ledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en tilsvarende ledning
- Brug ikke dette apparat, hvis stikket er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, hvis det er blevet tabt eller beskadiget, eller hvis det er faldet i vand. I så fald skal apparatet inspiceres og repareres.
- Bær ikke apparatet ved hjælp af strømforsyningsledningen, og brug heller ikke ledningen som håndtag. Afbryd altid apparatet fra strømforsyningen efter brug eller inden rengøring.

- Hvis apparatet falder i vand, skal du straks trække stikket ud, inden du fjerner det.
- Et elektrisk apparat må aldrig efterlades tilsluttet og uden opsyn. Afbryd det fra strømforsyningen, hvis du ikke bruger det.

- Hold strømledningen væk fra varme overflader.

- Brug ikke dette produkt, før du skal sove. Massage har en stimulerende effekt, der kan hæmme søvn.

- Brug ikke dette massageapparat, mens du sover.

- Lad aldrig noget falde ned i eller indsæt nogen genstand (tegnestift eller anden metalclips) i nogen af åbningerne på denne enhed.

- Brug aldrig dette apparat i et rum, hvor der anvendes aerosolprodukter (sprays), eller i et rum, hvor der administreres ilt.

- Brug ikke dette apparat under et tæppe eller en pude. Overdreven varme kan forårsage brand, elektrisk stød eller andre skader.

- Når du tager stikket ud af apparatet, skal du sikre dig, at “Tænd/Sluk”-knappen er slukket, før du fjerner stikket.

- Hvis du er bekymret for dit helbred, skal du konsultere en læge, før du bruger dette apparat.

- Hvis du oplever smerte under brug af dette apparat, skal du straks stoppe brugen og kontakte din læge.

- Brug aldrig dette apparat på en del af kroppen, der er hævet, betændt, eller hvis du har nogen form for hududslæt.

- Dette produkt er et ikke-professionelt massageapparat, der er designet til at lindre trætte muskler. Brug ikke dette apparat som en erstatning for medicinsk behandling; det er udelukkende beregnet til brug i familien.

Funktioner:

- Massage med vibrationer

- 5 motorer

- 4 vibrationsmodi + 1 automatisk tilstand

- 4 massageintensiteter

- 4 massageområder (Øvre ryg, nedre ryg, hofter, lår)

- 1 “varme”-funktion

- Timer-indstillinger (15, 30, 60 min)

Beskrivelse af produktet:

Rygmassageren er udstyret med et stroppesystem, der gør det muligt at fastgøre den til enhver stol. Før blot stropperne rundt om stoleryggen, saml dem, og fastgør dem til hinanden ved hjælp af de to selvklæbende ender.

Billedet i toppen repræsenterer følgende punkters placering på produktet:

1. TÆND/SLUK
2. 4 forskellige massageformer
3. 1 automatisk tilstand
4. 4 vibrationsintensiteter
5. 3 massagevarigheder
6. Massage til øvre ryg
7. Massage til nedre ryg
8. Massage til hofter
9. Massage til lår
10. “Varme”-funktion

Rygmassageren drives via en adapter. Først skal du tilslutte enden af strømforsyningskablet til indgangskonnektoren, der er placeret på højre side af sædet. Derefter sættes adapteren i en stikkontakt. Når den er tilsluttet strømforsyningen, er Rygmassageren klar til brug.

Du kan også tilslutte din pude i bilen ved hjælp af den medfølgende 12-volt adapter og cigarettænderen. Husk, at massagepuden ikke må bruges under kørsel.

Start eller stop apparatet ved blot at trykke på TÆND/SLUK-knappen (se billedet, punkt 1).

Manuel tilstand:

Med tilstand har du mulighed for at vælge:

- En type massage blandt de fire tilgængelige: Tilstand 1, 2, 3, 4 (se billedet, punkt 2).
- En af de fire vibrationsintensiteter (se billedet, punkt 4).
- Varigheden af din massage (15, 30 eller 60 minutter) (se billedet, punkt 5).
- Massageområdet efter dine ønsker eller behov (se billedet, punkterne 6, 7, 8 og 9).
- “Varme”-funktionen, som hjælper med at slappe af i musklerne (se billedet, punkt 10).

Automatisk tilstand:

Denne tilstand består af en sekvens af forskellige massager. Denne funktion er værdifuld, da den tilbyder en varieret massage. Funktionerne “TIMER”, “INT.” og “HEAT” samt det ønskede massageområde kan også bruges i automatisk tilstand.

Vedligeholdelse:

- Placer Rygmassageren i sin æske og opbevar den et tørt sted.
- Undgå kontakt med skarpe kanter og andre spidse genstande, der kan skære eller punktere stoffets overflade.
- For at undgå beskadigelse af strømledningen, må du ikke vikle den rundt om puden.
- Hæng ikke puden op i fjernbetjeningsledningen eller strømledningen.
- Afbryd puden fra strømforsyningen, og vent et par minutter, før du rengør den.
- Rengør den med en blød, let fugtig svamp.
- Sørg for, at vand eller andre væsker aldrig kommer i kontakt med puden.

- Nedsænk den aldrig i væske for at rengøre den.
- Brug aldrig slibende rengøringsmidler, børster eller opløsningsmidler til at rengøre den.

Bortskaffelse af affald:

- Al emballage består af materialer, der ikke udgør nogen fare for miljøet, og som kan afleveres på dit lokale sorteringscenter til genanvendelse som sekundære råmaterialer.
- Pap kan bortskaffes i en papirgenbrugsbeholder.
- Emballagefilm skal afleveres på dit lokale sorterings- og genbrugscenter.
- Når du er færdig med at bruge enheden, skal du bortskaffe den på en miljøvenlig måde og i overensstemmelse med gældende lovgivning.