

BRUGERMANUAL FOR PEDALTRÆNER,
ELEKTRISK



MD

CE

GENERELLE ADVARSLER

Manglende overholdelse af følgende sikkerhedsforanstaltninger kan resultere i skader, der ikke fremmer helbredelse, eller andre skader.
Advarsel:

1. Stå ikke på pedalerne.
2. Sid på en stol, sofa eller seng, når du træner.
3. Før brug skal du sikre, at alle bolte, skruer, knapper, rammer og beslag er fastgjort.
4. Patienter, personer med handicap og ældre skal bruge produktet i selskab med en anden person.
5. Personer med hjertesygdomme eller som er blevet rådet til at undgå hård fysisk aktivitet, bør følge lægens råd og træne derefter.
6. Dette produkt bør ikke bruges af personer med ubehandlede skader.
7. Børn og personer med handicap skal bruge udstyret under opsyn af en værge/plejer.
8. Produktet er specielt designet til hjemmebrug.
9. For at undgå skader under transport af udstyret, vær særligt opmærksom på sikkerhed.
10. Før brug af produktet udfør passende udstrækningsøvelser for at forhindre skader under træning.

FORSIGTIG: Undersøg alle dele for skader, der måtte være opstået under transport. BRUG IKKE produktet, hvis der er skader. Kontakt producenten for yderligere information.

FORSIGTIG: Enhver alvorlig hændelse i forbindelse med produktet skal rapporteres til producenten og til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren eller patienten bor.

FORSIGTIG: Der kan være risiko for fastklemning og/eller kompression af kropsdele på brugeren/ledsageren i åbningerne mellem komponenterne under brug og drift af produktet, samt under montering og justering af mekanismerne. Disse operationer skal udføres med særlig omhu. Efter justering stabiliseres positionen ved at stramme møtrikker/skruer sikkert.

FORSIGTIG: Det er forbudt at bruge produktet i strid med dets tiltænkte formål.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs venligst følgende instruktioner grundigt, før du bruger produktet.

Kontakt din læge, før du bruger rotoren eller andet træningsudstyr. Denne regel skal især overholdes i følgende tilfælde:

1. Kræft.
2. Genoptræning efter en nylig kirurgisk procedure.
3. Dokumenterede hjerteproblemer.
4. Problemer med hofterne.
5. Trombose.
6. Brækkede knogler.
7. Epilepsi.
8. BRUG IKKE under graviditet.

FORSIGTIG:

Kontroller regelmæssigt, at alle fastgørelseselementer er ordentligt fastgjort og korrekt forbundet. Tjek og stram alle dele af enheden hver tredje måned. Hvis du er i tvivl om nogen del af maskinen, bedes du kontakte din forhandler.

Vi anbefaler, at slidte komponenter udskiftes med originale dele. Brug af andre reservedele kan forårsage skader eller påvirke maskinens funktion.

GENERELLE INSTRUKTIONER

Visse forholdsregler, herunder de nedenfor nævnte, bør altid overholdes ved brug af elektriske apparater. Dette inkluderer vigtig information om sikkerhed, brug og vedligeholdelse.

BRUG

Rehabiliteringsrotoren er en kompakt træningscykel, som kan opbevares let, når det er nødvendigt. Rotoren bruges primært til rehabilitering af personer med lammelser i lemmerne, f.eks. efter en ulykke eller et slagtilfælde. Ved regelmæssig brug øger den blodtrykket og styrker muskulaturen. Den er ideel til moderate kardiovaskulære øvelser.

Tilslut strømadapteren til en DC-strømkilde, og tryk på den røde knap under fjernbetjeningen til position I. Når knap (1) trykkes, starter enheden på hastighedsniveau 1, og tiden sættes til 5 minutter. Displayet viser cykliske tilfældige data: hastighed, tid, distance og kalorier (scanning).

Ved at trykke på knap (2) for tid kan du indstille en tid fra 1 til 15 minutter. Hold knappen (2) nede for hurtigere justering, indtil den ønskede tid vises.

Enheden slukker automatisk, når den indstillede tid er udløbet.

Tryk på knap (4) Speed+ for at øge hastigheden. Tryk på knap (3) Speed- for at reducere hastigheden. Hold knap (4) eller (3) nede for hurtigere justering, indtil du når det ønskede hastighedsniveau.

Brug knappen (5) Reverse for at ændre pedalerens rotationsretning.

Tryk én gang på knappen (6) MODE for at vise hastighed, tid, distance og kalorier. Tryk på knappen flere gange, indtil et rødt lys vises under bogstaverne Scan, så tilfældige parametre vises. Tryk på (1) for at slukke. Når du er færdig, tryk på den røde knap under fjernbetjeningsholderen. Indstil til 0 for at slukke

enheden helt.

BRUGSANVISNING

Det anbefales at starte med korte træningspas på 3 til 6 minutter ved lav hastighed to gange om dagen. Forøg gradvist sessionernes varighed til maksimalt 15 minutter pr. session, to gange dagligt. Når brugeren er komfortabel med øvelsen, kan højere hastigheder prøves. Vi anbefaler dog, at du konsulterer din læge først.

MONTERINGSVEJLEDNING

Fjern enheden fra kassen og læg den på gulvet, som vist på figur 1.
Assistance fra en anden person er påkrævet til monteringsarbejdet.

Leveringsomfang:

(A) Hoveddel; (C-L) Venstre pedal; (C-R) Højre pedal; (B) Stabiliseringsstang; (B1) Bageste stabiliseringsstang; (D) M-4x25 bolt; (E) M-4 låseskive; Pedal kombinationsnøgle.

1. MONTERING AF STABILISATORER

Tag stabilisatoren (B) mærket (A) og placer den foran på enheden mærket (A), som vist i figur 2, og indsæt derefter M-4x25 skrue (D) sammen med låseskiverne (E).

Tag derefter den bageste stabilisator (B1) mærket med bogstavet (B), og følg den samme monteringsprocedure som for den forreste stabilisator, se figur 3.

2. MONTERING AF PEDALER

Højre og venstre refererer til brugerens position, når øvelserne udføres.

Sæt den højre pedal (C-R), mærket med (R), på højre krumtap, som også er mærket med (R). Dernæst, se figur 4. Monter venstre pedal (C-L), mærket med (L), på venstre krumtap, som også er mærket med (L), se figur 4.

3. TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING

Tilslut enheden til en jordet stikkontakt (220 V). Indstil kontakten (L) til position [1], se figur 5.

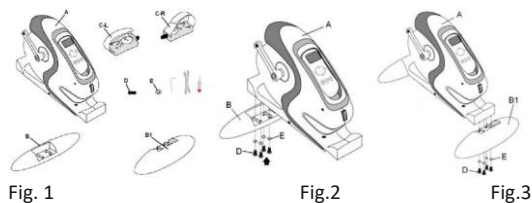


Fig. 1

Fig.2

Fig.3

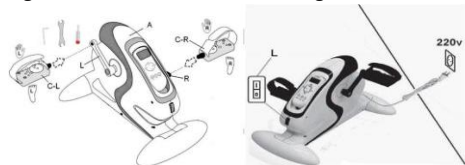


Fig. 4

Fig.5


AT51125

Displayindikator: Hastighed, Tid, Distance (afstand i km), Kalorier, Scan (viser tilfældige data, såsom hastighed, tid, distance, kalorier).

- 1 - Strømforsyning
- 2 - (Tid) Knap til valg af tid (1-15 min).
- 3 - Hastighed - knap til reduktion af hastighed (12 hastighedsniveauer).
- 4 - Hastighed - knap til forøgelse af hastighed (12 hastighedsniveauer).
- 5 - (Omvendt) Fremad/baglæns - knap til ændring af pedaleres retning.
- 6 - (MODE) Knap til valg af visningstilstand for hastighed, tid, distance og kalorier

FJERNBETJENING

Scanning Hastighed Tid Distance Kalorier

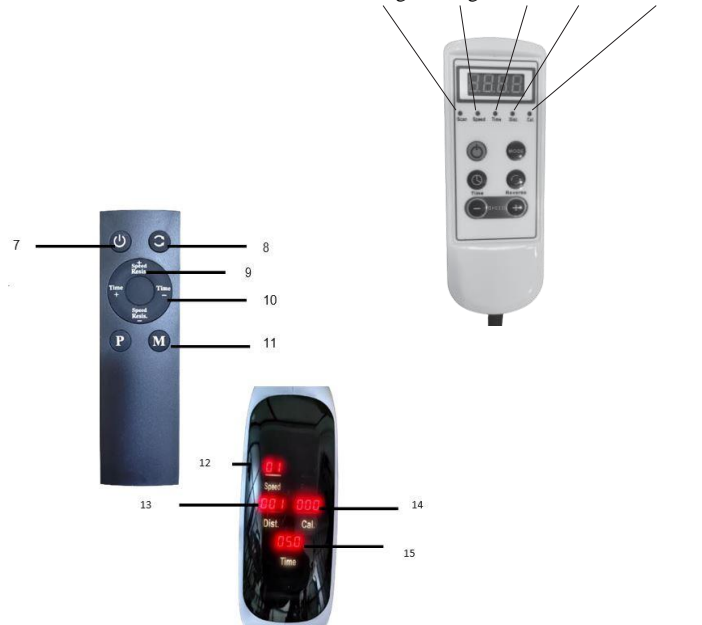

AT51127

7. Tænd/sluk-knap
8. Retningskift
9. Hastighedsindstilling
10. Tidsindstilling
11. Skift tilstand (aktiv/passiv)
12. Hastighed
13. Distance
14. Kalorier
15. Træningstid

PARAMETRE

Vægt: 5 kg
Bredde: 30 cm
Længde: 50 cm
Højde: 28 cm
Maksimal brugervægt: 120 kg



DETTE SYMBOL ANGI'VENDER DEN MAKSIMALE BRUGERVÆGT

FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød: Tag straks enheden ud af stikkontakten efter brug og før rengøring. Læs venligst omhyggeligt de instruktioner, der er indeholdt i dette dokument. Det indeholder vigtig information om sikkerhed, brug og vedligeholdelse af løbebåndet.

1. Sørg for, at forsyningsspændingen er passende til maskinen (220 V), figur 5, før tilslutning. Forsyningsspændingen skal stemme overens med den, der er angivet på typeskiltet, og hulleme i stikkontakten skal passe til apparatets stik. Hvis dette ikke er muligt, kontakt forhandleren.
2. Denne enhed er udelukkende designet til brug i hjemmet.
3. Lad ikke enheden stå uden opsyn, mens den er tilsluttet. Tag enheden ud af stikkontakten efter hver træningssession.
4. Placer enheden på en flad overflade og sørg for mindst 0,5 meter fri plads bag den.
5. Forældre og/eller plejere skal være opmærksomme på børns nysgerrige natur, som kan føre til farlige situationer og ulykker. Enheden må under ingen omstændigheder bruges som legetøj.
6. Hold hænderne væk fra bevægelige dele.
7. Brug passende tøj og fodtøj. Sørg for, at alle snørebånd/bånd er ordentligt bundet.
8. Opbevaring af enheden i et fugtigt miljø over længere tid frarådes, da det kan medføre rust.
9. Brug ikke enheden, hvis ledningen er beskadiget eller slidt.
10. Hold strømledningen væk fra varme overflader.
11. Denne maskine er beregnet til udendørs brug.
12. Hvis du ønsker at afbryde enheden fra strømforsyningen, skal du først slukke for strømmen ved hjælp af knappen og derefter tage stikket ud af stikkontakten.

KONTRAINDIKATIONER Fysiske eller mentale begrænsninger (f.eks. synsnedsettelse), som forhindrer sikker brug af produktet.

RENGØRING/VEDLIGEHOLDELSE

Sluk for enheden, og tag stikket ud af stikkontakten, før du rengør! Rengør med en let fugtig klud og sæbe.

For at opretholde produktets ydeevne, vær opmærksom på rengøring af alle komponenter og opbevar det under passende forhold. Opbevaring i rum med meget høj luftfugtighed (badeværelser, vaskerum osv.) eller udendørs og dårlig vedligeholdelse vil føre til hurtig forringelse af ydeevne og æstetik.

FORSIGTIG: Udsæt ikke produktet for direkte sollys, da visse dele kan misfarves.

FORSIGTIG: Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af forsømmelig vedligeholdelse, ukorrekt service eller manglende overholdelse af anbefalingerne i denne brugsanvisning.

ADVARSEL:

I tilfælde af en "alvorlig hændelse" i forbindelse med enheden, som direkte eller indirekte har ført til, kunne have ført til, eller sandsynligvis vil føre til nogen af følgende hændelser:

- a) dødsfald af patient, bruger eller anden person, eller
- b) midlertidig eller permanent forværring af sundheden hos patient, bruger eller anden person, eller
- c) en alvorlig risiko for folkesundheden, skal en sådan "alvorlig hændelse" anmeldes til producenten og til den kompetente myndighed i det land, hvor brugeren eller patienten bor.

ADVARSEL:

I tilfælde af smerte, allergiske reaktioner eller andre alarmerende, uklare symptomer relateret til brugen af det medicinske udstyr, konsulter venligst en sundhedsperson.

BEMÆRK: Det er forbudt at bruge produktet i strid med dets tilsigtede formål!

BEMÆRK: Inspektion af alle dele for eventuelle transportskader er nødvendig. Hvis der opdages skade, MÅ PRODUKTET IKKE BRUGES. Kontakt producenten for yderligere information.

BEMÆRK: Kontroller før brug, at alle komponenter er korrekt samlet.

MÅLGRUPPE AF PATIENTER

Sundhedspersonen angiver brugen af produktet til voksne og børn på eget ansvar, med hensyn til de tilgængelige varianter/størrelser/nødvendige funktioner/størrelse og indikationer, samt med udgangspunkt i oplysningerne fra producenten.

BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET EFTER UDGÅENDE BRUG

Efter at enheden er trukket tilbage fra brug, skal elektriske produkter bortskaffes i henhold til reglerne for elektrisk og elektronisk udstyr.

GARANTIBEVIS

Model:

Serienummer:

Salgsstedets stempel

og sælgerens læselige underskrift:

ANTAR Sp. J., 03-068 Warszawa, ul. Zawisłańska 43, giver hermed 12 måneders garanti på rollatoren, gældende fra købsdatoen. Produkter finansieret af den nationale sundhedsfond dækkes af en udvidet garantiperiode, der dækker halvdelen af den fastsatte levetid i bekendtgørelsen om garanterede tjenester, forudsat at levetiden er angivet i måneder eller år.

Under garantiperioden forpligter ANTAR sig til at udføre de nødvendige reparationer for at genoprette produktets korrekte funktion inden for 14 dage fra modtagelsen af produktet på servicecenteret, sammen med købsbevis og garantikort.

ANTAR forbeholder sig retten til at erstatte produktet, hvis reparation anses for at være uøkonomisk. Reparation eller udskiftning af defekte produkter forlænger ikke garantiperioden.

Hvis produktet viser tegn på fejl, send det straks til ANTAR (jf. punkt 1) eller kontakt salgsstedet.

Læs instruktionerne grundigt før brug, og følg dem. Hvis produktet bruges forkert eller i strid med anbefalingerne, bortfalder garantien uigenkaldeligt.

Garantien dækker ikke skader forårsaget af ydre mekaniske påvirkninger, belastninger der overstiger den maksimalt tilladte brugervægt som beskrevet i manualen, samt kontakt med alkohol, fede stoffer eller benzin. Garantien dækker ikke dele, der udsættes for almindeligt slid, såsom lejer, gummidele og andre.

Produktet, der leveres til service i forbindelse med en klage, må ikke udgøre en epidemiologisk risiko.

DENNE GARANTI ER KUN GYLDIG SAMMEN MED KØBSBEVISET (REGNING, KVITTERING, FAKTURA). VED KLAGE SKAL KØBSBEVIS VEDLÆGGES. FOR AT FORLÆNGE GARANTIPERIODEN FOR PRODUKTER FINANSIERET AF DEN NATIONALE SUNDHEDSFOND, VEDLÆG EN KOPI AF BESTILLINGEN AF ORTOPÆDISKE HJÆLPEMIDLER.

Klager indsendt uden købsbevis og et garantikort med produktets serienummer vil ikke blive behandlet.

 ANTAR Sp. J.
03-068 Warsaw, ul. Zawisłańska 43
Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30
www.antar.net

